


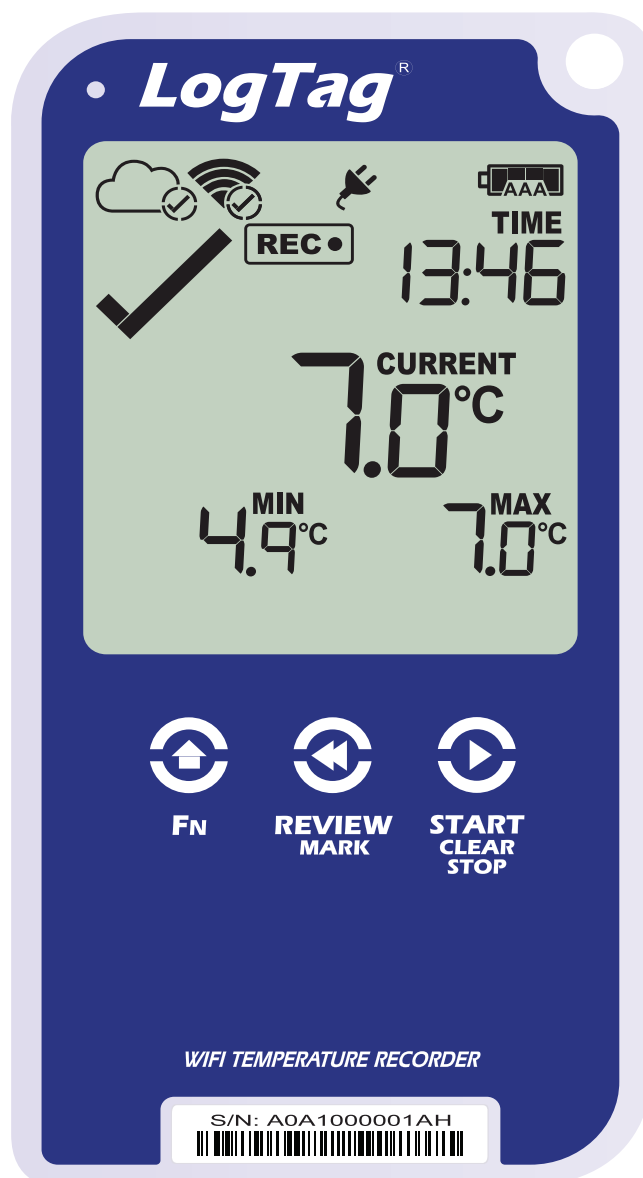

LogTag[®] UTRED30-WiFi

Краткое руководство
пользователя

Версия D - Февраль 2020

www.logtagrecorders.com

Содержание


Состав упаковки	3
Установка батареи	4
Загрузка LogTag Analyzer	5
Запуск Мастера подключений	6
Подключение к сети WiFi	9
Настройка UTRED30-WiFi	12
LogTag Online	13
Установка настенного крепления	15
Запуск UTRED30-WiFi	16

Состав упаковки


Проверьте, что у Вас есть все перечисленное ниже, прежде чем приступить к работе с UTRED30-WiFi.



UTRED30-WiFi

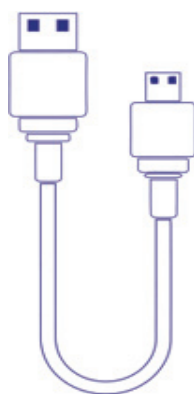

кабель USB

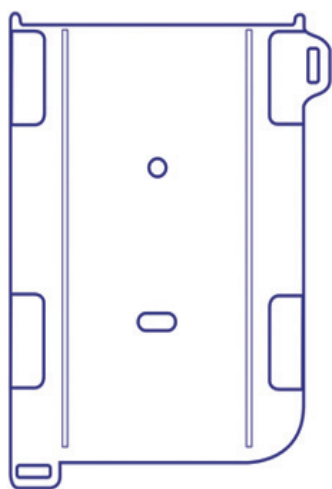

Настенное крепление
(не включено)



2x AAA
батарейки
(не включено)



Внешний датчик
(не включено)


Установка батареи



Кабель USB - основной способ постоянной подачи электропитания на устройство UTRED30-WiFi через разъем USB.

Батарейки AAA - резервный способ подачи электропитания на устройство, обеспечивающий функционирование в случае отключения кабеля USB.

1. Для открытия крышки батарейного отсека на задней поверхности устройства необходима небольшая крестовая отвертка (типа Phillips).

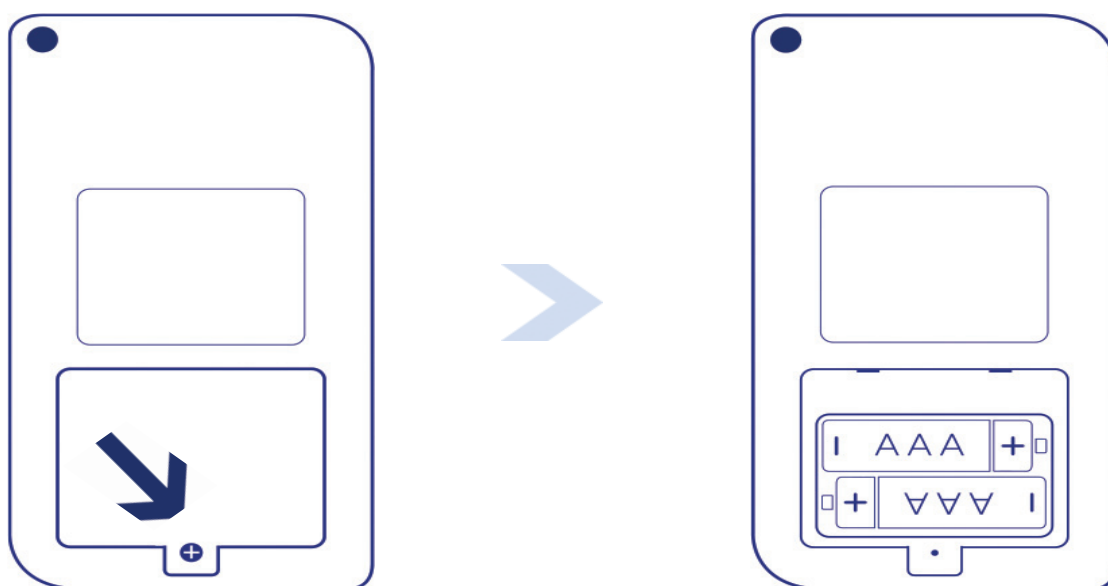

2. После открытия крышки батарейного отсека вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность.
3. Установите на место крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее винтом.

Загрузка LogTag Analyzer

Для загрузки последней версии LogTag Analyzer откройте браузер и перейдите по ссылке:

 <https://logtagrecorders.com/software/LTA3/>

1. Заполните форму и нажмите кнопку "Go to downloads page".
2. Нажмите "Download Now", чтобы начать загрузку.
3. Нажмите "Начать" или "Сохранить", затем откройте сохраненный файл, чтобы запустить Мастер установки LogTag Analyzer.
4. Следуйте пошаговым инструкциям Мастера установки.
5. Нажмите "Готово" после завершения установки.

Если у Вас уже установлена программа LogTag Analyzer, проверьте наличие обновлений в меню программы "Справка"- "Проверить наличие обновлений".

Внимание: Перед запуском LogTag Analyzer убедитесь, что на компьютере не запущено другое ПО LogTag.

Запуск Мастера подключений

Запустите LogTag Analyzer и выберите в меню "LogTag Online"- "Мастер подключений".

Перед началом этого процесса убедитесь в наличии стабильного подключения к сети Интернет.

Откроется первая страница Мастера подключений. Нажмите "Start".



Вам будет предложено авторизоваться под аккаунтом LogTag Online. Если у Вас еще нет такого аккаунта,

Запуск Мастера

подключений - продолжение

перейдите в браузере по указанной ниже ссылке и следуйте инструкциям на экране для регистрации аккаунта

<https://logtagonline.com/signup>

или нажмите на ссылку "Create a LogTag Online Account" в окне программы.



LogTag®Online Connection Wizard

Sign in to your LogTag®Online Account below and the Wizard will assist in registering your WiFi device(s). If you do not have an account, click "Create an Account". Return to this Wizard when your account setup is complete.

EMAIL

PASSWORD

[Forgot your Password?](#)

[Create a LogTag®Online Account](#)

[Help](#) Ver: 1.0.6.4 Skip SIGN IN


Если пропустить этот шаг, в дальнейшем Вам придется вручную регистрировать устройство в LogTag Online или повторно запускать Мастер подключений.

После ввода логина и пароля аккаунта нажмите "Sign In", чтобы продолжить настройку подключения устройства к сети WiFi.

Запуск Мастера

подключений - продолжение

Ваш аккаунт LogTag Online создан и Вы готовы приступить к подключению устройства к сети WiFi.

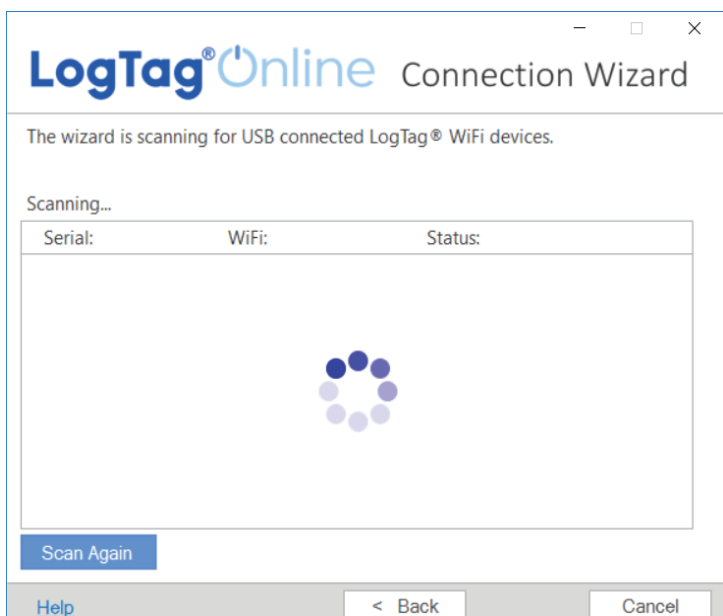

Мастер начнет поиск подключенных устройств LogTag.

Если устройство не будет обнаружено, повторно проверьте его подключение кабелем USB к компьютеру и нажмите "Scan Again".

Scanning...		
Serial:	Configured WiFi:	Status:
A0A100003550	LogTag24	Registering

Как только устройство будет обнаружено, оно появится в табличке слева и будет зарегистрировано в Вашем аккаунте LogTag Online.

Подключение к сети WiFi

Serial:	Configured WiFi:	Status:
A0A100003550	LogTag24	Registered

В поле Status появится надпись "Registered" зеленого цвета.

После успешной идентификации и регистрации одного или нескольких устройств Мастер автоматически переключится на следующий экран.



LogTag® Online Connection Wizard

Please select your Wireless Network from the dropdown below or type it in, provide the password for the chosen network. Then click 'Next'.

Network Name
LogTag5G

Network Password

☐ Advanced Settings

[Help](#) Ver: 1.0.6.4 < Back Next >

1. Выберите свою сеть Wifi из выпадающего списка в поле Network Name и введите пароль доступа к этой сети.

Примечание: Если Вам необходимо изменить дополнительные настройки подключения, отметьте пункт "Advanced Settings".

2. После того, как Вы выбрали имя сети и ввели пароль, нажмите "Next".

Примечание: некоторые сети WiFi могут не отображаться в списке из-за настроек безопасности (на роутере или точке доступа включена опция "Скрывать SSID").

Если Ваша сеть защищена таким образом, Вы можете вручную ввести имя сети (SSID) в поле Network Name.



В течение примерно 10 секунд устройство будет подключено к Вашей сети WiFi.


Мастер подключения проверит доступность серверов LogTag Online из Вашей сети.



После того, как Мастер отобразит надпись "Connection Succeeded", нажмите "Close", чтобы закрыть Мастер или нажмите ссылку "LogTag Online Sign In page" для перехода на сайт LogTag Online.

Настройка UTRED30-WiFi

Подключите устройство UTRED30-WiFi к компьютеру с помощью кабеля USB. Разъем USB находится в нижней части устройства и защищен резиновой заглушкой.

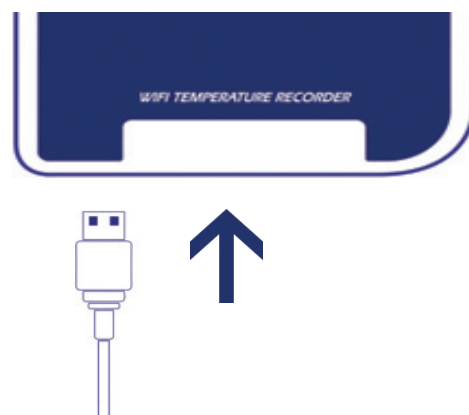

1. Запустите LogTag Analyzer.
2. Выберите в меню "LogTag"-**"Настройка"** или нажмите иконку Мастера настройки.
3. Настройте необходимые параметры мониторинга. Для получения подробной информации обратитесь к разделу [Настройка UTRED30-WiFi](#) в Руководстве пользователя или нажмите кнопку "F1" для справки.
4. Нажмите **"Настройка"** для загрузки параметров конфигурации в устройство.
5. Нажмите **"Заккрыть"** для выхода из режима настройки.

Установка настенного крепления

Настройка устройства UTRED30-WiFi завершена.

Установите настенное крепление в области, где будет проводиться мониторинг (желательно на уровне глаз), с помощью двустороннего скотча (в комплекте) или шурупов.

Перед установкой настенного крепления убедитесь, что длины проводов питания USB и внешнего датчика будет достаточно для их комфортного размещения без рисков запутывания и обрыва.

Вставьте устройство UTRED30-WiFi в настенное крепление, подключите внешний датчик и кабель питания USB.

На дисплее будет отображено "READY" (рисунок справа).

Примечание: при успешном подключении оба значка (облако и WiFi) должны отображаться с галочками (как на рисунке справа).



Запуск UTRED30-WiFi

Нажмите и удерживайте кнопку

START/Clear/Stop.

Вместе с надписью

READY появится


надпись **STARTING.**

Удерживайте кнопку, пока надпись **READY** не исчезнет.

Устройство начнет записывать показания температуры.

Устройство **не** начнет запись, если:

- Вы отпустили кнопку до исчезновения надписи **READY.**
- Вы удерживали кнопку более 2 секунд после исчезновения надписи.
- Батарейки разряжены и устройство не подключено к основному питанию кабелем USB.

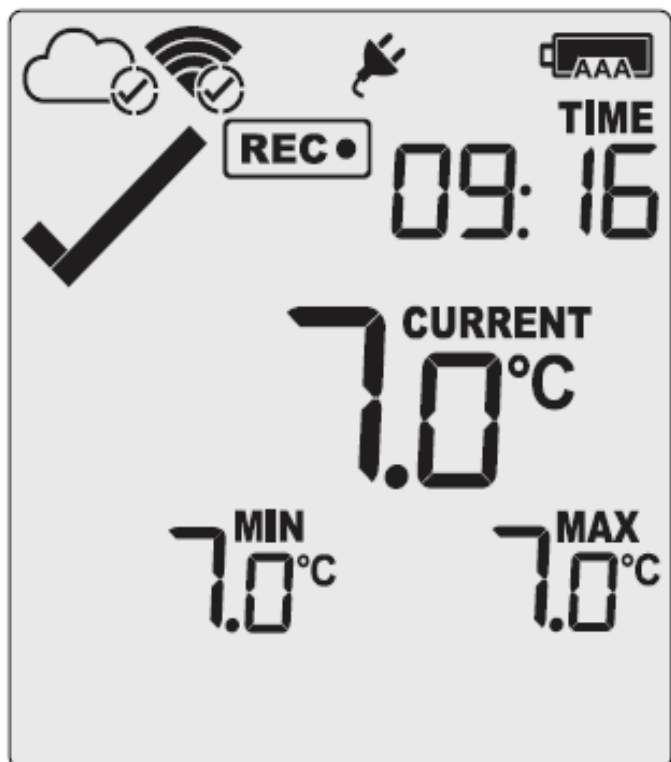

LogTag Online


LogTag Online - защищенный онлайн-сервис для сохранения данных мониторинга устройств LogTag в Вашем аккаунте.

Авторизация в LogTag Online

Откройте браузер и перейдите по ссылке:
<https://logtagonline.com>


Введите Email и пароль, затем нажмите "Sign In".

Примечание: Если Вы еще не создали аккаунт в Мастере подключений, нажмите кнопку "Create an Account" и следуйте инструкциям на экране.

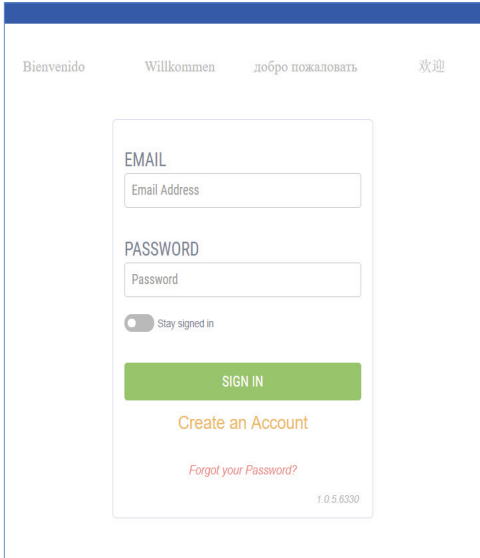

После авторизации Вы увидите информационную панель (Dashboard) и автоматически созданную локацию (Location) - место мониторинга.

Если Вы не видите локацию, зарегистрируйте устройство вручную, нажав кнопку "Register Device" в разделе Devices (Устройства) на информационной панели или в меню Devices

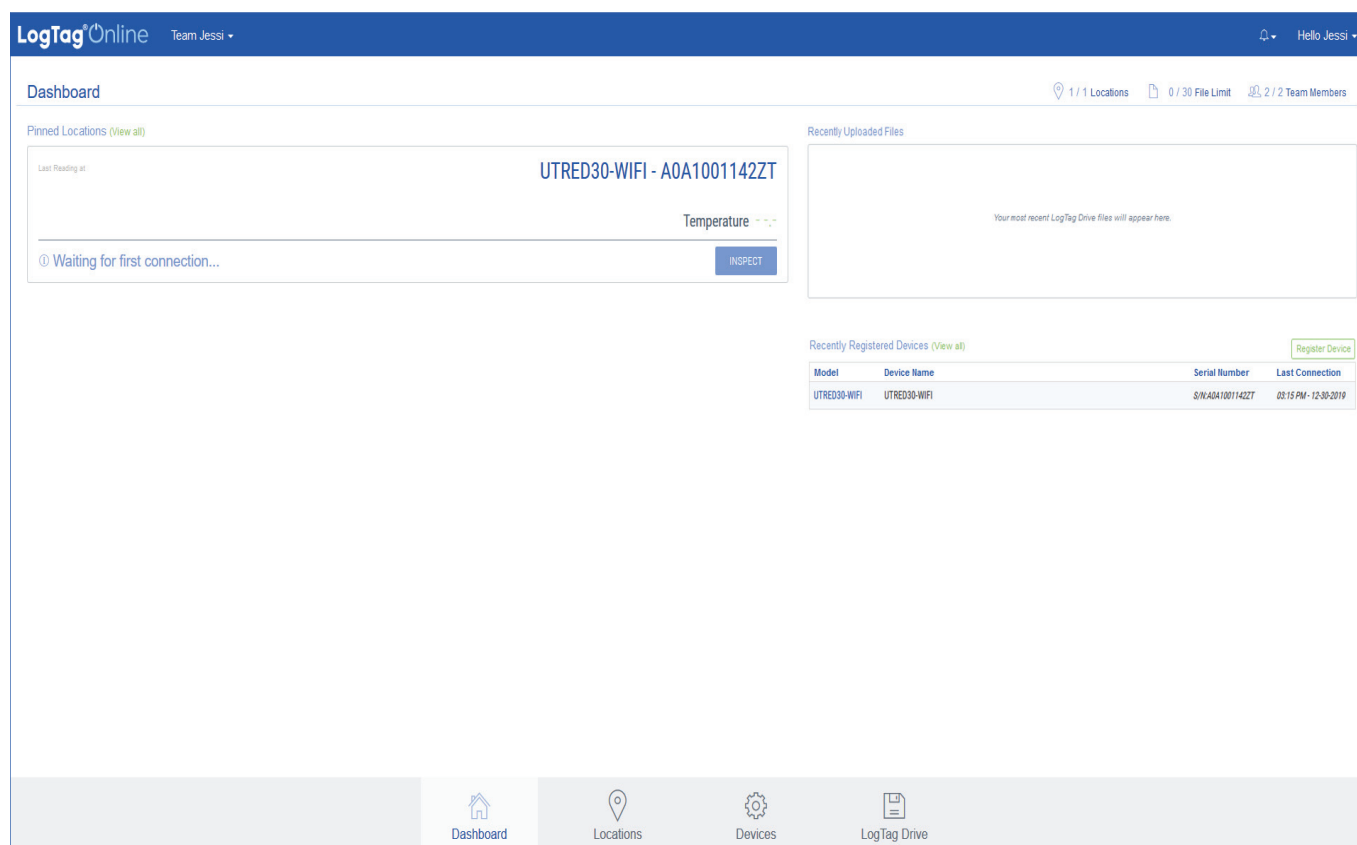

в нижней навигационной панели.

После регистрации устройства будет автоматически создана локация. Она появится в разделе Pinned Locations на информационной панели или в разделе Locations в нижней навигационной панели.

Для получения более подробной информации о регистрации устройств и локациях обратитесь к разделам Devices (Устройства) или Locations (Локации) в Кратком руководстве пользователя LogTag Online.